



VIVO Red Light Cap 2.0

Handleiding

Rood lichttherapie voor hoofd, hersenen en haar



Gefeliciteerd met je nieuwe Red Light Cap!

Voordat je aan je eerste sessie begint, zorg er alsjeblieft voor dat je deze handleiding leest, zodat je de bediening begrijpt.

Opmerkingen: Elke LED aan de binnenkant heeft drie chips, één 670 nm (nanometer), één 810 nm en één 940 nm. Let op dat de nabij infrarood led onzichtbaar is voor het blote oog.

Wat zit er in de doos?

- 1* Vivo Red Light Cap
- 1* Geaard netsnoer
- 1* Adapter
- 1* USB kabel
- 1* Handleiding


Specificaties

Vermogensclassificatie	75W
Werkelijk vermogen	26.1W / 19.6W /14.5W
Diameter	200 MM
Aantal LED's	150*0.5W
Dimbaar	Ja (3 niveaus)
Nettogewicht	0,18KG (alleen voor de pet)
Golflengte	1*670nm ; 1*810nm; 1*940nm
EMF (elektromagnetisch veld)	0.3 V/m Elektrisch veld
Timer	15 minuten
Maat aanpasbaar	Ja, met rits
Materiaal	Stof
Pulsering	Ja, optioneel 10 Hz
Dubbele knoppen	AAN / UIT, Dimbaar, Puls, Schakel golflengte
Adapter	CE ROHS UL

DeVivo Cap 2.0 maakt gebruik van decombinatie rood licht, 670nm, en infrarood licht, 810nm & 940nm. Die combinatie is gekozen om de ideale blend aan golflengtes te bieden voor hoofd, haar en hersenen.

Gebruikersinstructies

- 1) Steek de stekker in het stopcontact of gebruik een powerbank (niet inbegrepen) met de USB-kabel en de twee knoppen zullen cyaan oplichten. Druk vervolgens op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. (Het begint op het laagste helderheidsniveau van 50%.)

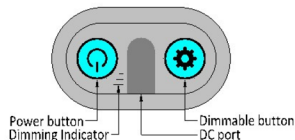

- 2) Afstand: 0 cm voor de beste resultaten, plaats het apparaat op je hoofd voor haargroei, hoofdpijn en verbetering van geheugen en hersenfuncties.
- 3) Opties selecteren:


Druk snel een keer op de aan/uit-knop, zodat deze **groen** oplicht, en vervolgens:

- a. Druk één keer op de knop, en alle leds (670 nm, 810 nm, 940 nm) gaan aan.
- b. Druk nogmaals, en alleen de rode leds (670 nm) zullen aan zijn, en de nabij-infrarode leds (810 nm en 940 nm) zijn uit.
- c. Druk opnieuw, alleen de nabij-infrarode led (810 nm en 940 nm) is aan, en de rode leds (670 nm) zijn uit. Let op dat infrarood licht onzichtbaar is voor het menselijk oog, dus het kan lijken alsof de leds uit zijn, terwijl de infrarode led feitelijk aan is.
- d. Druk nogmaals, en alle LED's gaan uit.



Als je de aan/uit-knop langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, gaat de aan/uit-knop **blauw** oplichten en:

- a.** Druk één keer op de knop en alle leds (670 nm, 810 nm, 940 nm) gaan over naar pulserende modus.
- b.** Druk nogmaals, en alleen de rode leds (670 nm) gaan over naar pulserende modus.
- c.** Druk opnieuw, en alleen de nabij-infrarode leds (810 nm en 940 nm) gaan over naar pulserende modus.
- d.** Druk nogmaals, en alle LED's gaan uit.

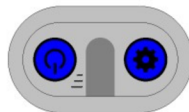

Voor het aanpassen van de helderheid in dimbare modus, schakel over naar de andere knop.

Modus 1: Laag niveau (vermogen: 50%)

Modus 2: Midden niveau (vermogen: 75%)

Modus 3: Hoog niveau (vermogen: 100%)



Wanneer het apparaat is ingeschakeld, staat die automatisch op het lage niveau (modus 1). Druk nogmaals op de knop om naar het middelste niveau te gaan, en druk opnieuw om naar het hoogste intensiteit niveau te gaan (modus 3).

4) Welk niveau je kiest, hangt af van jou en het seizoen. We raden het hoogste niveau aan voor het winterseizoen en het laagste niveau voor het zomerseizoen. 5) Gebruiksfrequentie: Gebruik het apparaat 1-2 keer per dag gedurende minimaal 4 weken. Voor het gemak schakelt het apparaat automatisch uit na elke sessie van 15 minuten. Laat het apparaat enkele minuten afkoelen voordat je een andere behandeling start. Ontkoppel het apparaat van het stopcontact en bewaar het op een koele, droge plaats. 6) Onderhoud: Voor het reinigen raden we aan een vochtige doek of tissue te gebruiken om je pet lichtjes schoon te maken. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van stroom, de snoeren zijn losgekoppeld en uitgeschakeld. Reinig alleen het stoffen gedeelte van de pet en niet direct de LED-diodes. Onderdompel de pet niet in water. Laat de Vivo Cap 2.0 aan de lucht drogen en zorg ervoor dat deze niet in direct zonlicht wordt geplaatst.

Voordelen ondersteund door de wetenschap :

Onderzoek toont aan dat de golflengtes in het spectrum van 670-950 nm een optimale biologische respons vertonen, het:

- **Vermindert pijn of hoofdpijn**
- **Bevordert haargroei**
- **Verbeterd neurodegeneratieve aandoeningen**
- **Verbeterd de cognitieve**

Hoewel deze technologie geen bijwerkingen heeft, raden we aan de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

▷ **Dit apparaat is waterbestendig, maar niet waterdicht! Onderdompel de wikkel of de onderdelen ervan niet in water.**

▷ **Niet bedoeld voor gebruik door kinderen en zwangere vrouwen.**

▷ **Overschrijd niet 30 minuten per behandeling per dag.**

▷ **Kijk niet rechtstreeks in het licht.**

▷ **Gebruik de pulserende functie niet bij gevoeligheid voor lichtflitsen, hoofdpijn of bij epilepsie.**

▷ **Neem contact op met uw arts als u:**

a . Medische vragen heeft.

b. Vermoedt dat u een negatieve reactie heeft gehad van het gebruik van het apparaat.

c. Geneesmiddelen worden gebruikt die bekendstaan om lichtgevoeligheid te veroorzaken.

Toepassing

Hier is een voorbeeld van hoe je de Vivo Cap 2.0 kunt gebruiken. Tijdens het werken, lezen, of tv kijken!



DISCLAIMER

Vivo Red Light Therapy geeft geen claims of verklaringen of andere garanties met betrekking tot het vermogen van dit product om fysieke of mentale aandoeningen te genezen. Voorafgaand aan het gebruik van dit product moet altijd een gekwalificeerde gezondheidsdeskundige worden geraadpleegd met betrekking tot aandoeningen die medische aandacht vereisen.

Contact: Constructieweg 90-K, 3641 SP, Mijdrecht

Telefoon: 0297-893048

E-mail: info@vivoredlighttherapy.com

Website: www.vivoredlighttherapy.com